

Used Products

IMPLANTE - Abutment hecho con óxido de circonio - Corona - Disilicato de litio - Forma de Abutment retentivo - Diente posterior - Vivaglass CEM

☐ **VivaglassCEM PL**

Vivaglass CEM PL es un cemento de ionómero de vidrio auto polimerizable y de alta translucidez



☐ **OptraStick**

Instrumento de colocación que presenta una punta adhesiva flexible



☐ **Telio CS Inlay**

Material de obturación provisional fotopolimerizable para preparaciones inlay profundas con paredes paralelas y sellado de agujeros de implantes



☐ **OptraGate**

Permite retraer completamente los labios y mejillas asegurando un aislamiento relativo de manera sencilla



☐ **Ivoclean**

La pasta de limpieza universal, Ivoclean, limpia de manera efectiva las superficies de unión de las restauración protéticas tras la prueba intraoral



☐ **OptraPol**

OptraPol está especialmente diseñado para la finalización y pulido de todas las resinas del mercado en un solo paso



☐ **Cervitec Plus**

Barniz protector que contienen clorhexidina y timol protege las superficies radiculares expuestas y es auxiliar en el control del número de bacterias



Flowchart Vivaglass CEM

IMPLANTE - Abutment hecho con óxido de circonio - Corona - Disilicato de litio - Forma de Abutment retentivo - Diente posterior - Vivaglass CEM

1 Situación preoperatoria



El pilar se atornilla en su lugar.

2 Se prueba la restauración



Prueba de la restauración final. En esta etapa, se revisa el color, ajuste y oclusión de la restauración.

3 El acceso del tornillo se limpia y se sella



El acceso del tornillo se enjuaga con intensidad con un chorro de agua y secado con aire libre de aceite. A continuación el acceso del tornillo se obtura con una mota de algodón y **Telio CS Inlay**. Para los futuros pasos del tratamiento, aislar el campo operatorio con **OptraGate** por ejemplo. Opcionalmente puede colocar un cordón de retracción.

4 La restauración es pre-tratada



Grabar la restauración con ácido fluorhídrico al 5% (p. ej. **Gel de grabado IPS Ceramic Gel**) por 20 segundos o según lo especificado por el fabricante de los materiales restaurativos.

5 Vivaglass CEM es mezclado y aplicado



El polvo y el líquido de **Vivaglass CEM** se mezcla en partes iguales 1:1



El material de cementación se aplica a la restauración con una espátula o pincel.

6 La restauración se asienta y se retiran los excesos de cemento




La restauración se pone y se mantiene en su lugar con la presión constante de la luz.



Una vez el cemento se ha asentado completamente, se retira el exceso con un scaler por ejemplo. El tiempo de asentamiento es de 4 a 6 minutos.

7 La restauración completa es terminada

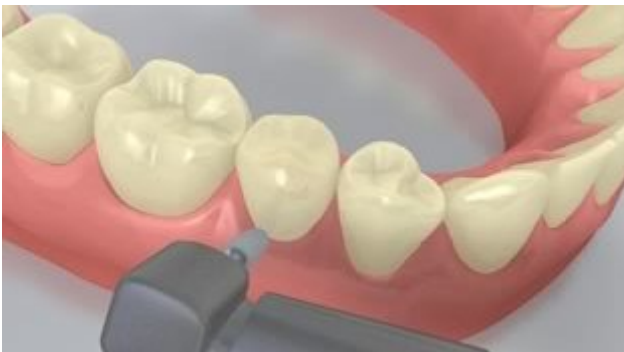

Las áreas proximales se ajustan con tiras de pulido y acabado. La oclusión y movimientos funcionales son revisados y ajustados si es necesario. Los márgenes de la restauración se pulen con pulidores (**OptraPol**) o discos de pulido.

8 Cuidado postoperatorio



Se aplica una capa delgada de **Cervitec Plus** donde sea necesario con la ayuda de un aplicador de Vivadent o un cepillo. El barniz se adhiere por si solo o con la ayuda de aire.