

# Used Products

DENT - Inlay, Onlay, Couronne partielle - Composite De Laboratoire - Multilink Automix

☐ **Multilink Automix**

Composite de collage universel autopolymérisant avec option photopolymérisation



☐ **Proxyl sans fluor**

Pâte profilactique sans fluor



☐ **OptraStick**

Bâtonnet flexible de préhension avec une pointe collante



☐ **Ivoclean**

La pâte universelle de nettoyage Ivoclean permet de nettoyer les intrados des restaurations prothétiques après essayage en bouche



☐ **Monobond Plus**

Monobond Plus est un conditionneur d'intrados universel pour tous les matériaux de restaurations prothétiques



☐ **OptraDam**

OptraDam Plus est une digue anatomique en latex pour une isolation totale du champ opératoire



☐ **Liquid Strip**

Gel à base de glycérine pour empêcher l'inhibition par l'oxygène de la couche de surface des composites avec les restaurations en composite ou en céramique



☐ **OptraPol**

OptraPol convient parfaitement pour la finition et le polissage en une seule étape de toutes les restaurations composites



☐ **Fluor Protector**

Fluor Protector est un vernis contenant du fluor, indiqué pour la désensibilisation et la prévention des caries



# Flowchart Multilink Automix

DENT - Inlay, Onlay, Couronne partielle - Composite De Laboratoire - Multilink Automix

## 1 Dépose de la provisoire



Déposer la restauration provisoire. Si nécessaire, retirer les résidus de colle provisoire de la préparation à l'aide d'une brosse à polir et d'une pâte de nettoyage exempte d'huile et de fluor (ex. **Proxyl sans fluor**). Ensuite, sécher la préparation avec de l'air exempt d'huile et d'eau.

## 2 Essayage de la restauration



Essayer la restauration définitive . À ce stade, contrôler la teinte, l'ajustage et l'occlusion.



Pour obtenir un résultat esthétique optimal, contrôler la teinte de la restauration finale à l'aide des pâtes d'essayage **Multilink Automix Try-In**. Après essayage, retirer soigneusement la pâte au spray d'eau et sécher la restauration à l'air sec exempt d'huile.

### 3 Pré-traitement de la restauration



Sabler la restauration selon les recommandations du fabricant de matériaux de restauration (ex. **SR Nexco**, 2 bar,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  100  $\mu\text{m}$ ). Sinon, gratter la restauration avec des pointes de finition diamantées.



Appliquer **Monobond Plus** sur les surfaces prétraitées à l'aide d'une brosse à dents ou d'une microbrosse, et laisser agir 60 secondes. Ensuite, sécher avec un souffle d'air puissant.

### 4 Isolation et nettoyage de la préparation




L'isolation relative du champ opératoire, de préférence avec **OptraDam** ou, à défaut, des tampons absorbants et une pompe à salive, est indispensable.



Nettoyer la préparation à l'aide d'une brosse à polir et une pâte de nettoyage exempte d'eau et de fluor (ex. **Proxyl sans fluor**). Puis rincer au spray d'eau. Ensuite, sécher à l'air exempt d'eau et d'huile. Éviter de dessécher.

## 5 Application de Multilink Primer A/B et Multilink Automix

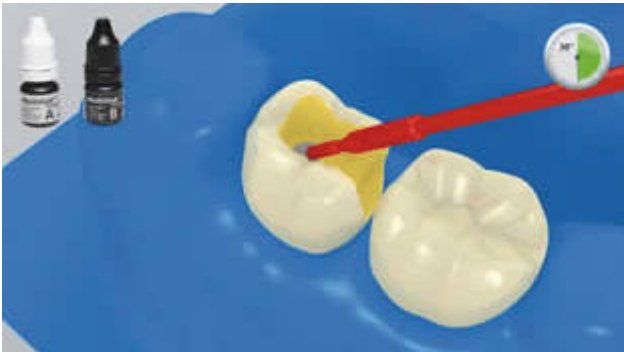

Appliquer le mélange Multilink Primer A/B sur toutes les surfaces de collage à l'aide d'une micro-brosse – en commençant par brosser l'émail très légèrement pendant de 30 secondes.



Disperser les excès de **Multilink Primer** à l'aide d'un souffle d'air puissant jusqu'à disparition du film mobile. Le primer étant autopolymérisant, il n'est pas nécessaire de photopolymériser !




**Multilink Automix** est extrait de la seringue automélangante et appliqué directement sur la restauration.


## 6 Mise en place de la restauration et retrait des excédents



Placer la restauration et la maintenir en exerçant une pression légère et constante.

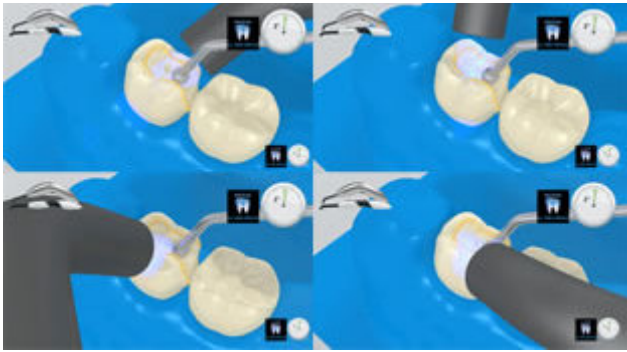

Photopolymériser les excès à l'aide d'une lampe à photopolymériser (mesio-oral, disto-oral, mesio-buccal, disto-buccal) à une distance d'env. 0-10 mm.

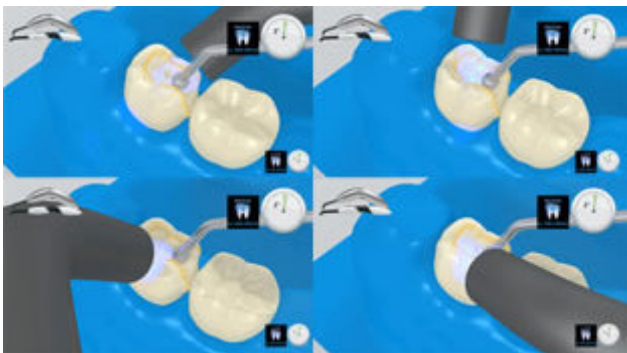

Intensité lumineuse environ 650 mW/cm<sup>2</sup>: 3 sec. Temps d'insolation par quadrant - ex. Bluephase en mode LOW  
Intensité lumineuse environ 1,000 mW/cm<sup>2</sup>: 1-2 sec. Temps d'insolation par quadrant - ex. Bluephase Style ou Bluephase en mode HIGH



Les excès de matériau, de la consistance d'un gel, se retirent facilement à l'aide d'un instrument à détartre.



Comme tous les composites, **Multilink Automix** est sujet à l'inhibition à l'oxygène. Pour éviter cela, il est conseillé de recouvrir les limites de la restauration avec un gel glyciné et imperméable (ex. **Liquid Strip**) immédiatement après avoir retiré les excès de colle.



Ensuite, photopolymériser tous les joints de collage pendant encore 20 secondes (environ 1100 mW/cm<sup>2</sup>). Laisser les matériaux opaques, c'est à dire imperméables à la lumière, autopolymériser.



Rincer **Liquid Strip** et retirer la digue.

#### 7 Finition de la restauration terminée



Adapter les zones proximales à l'aide de strips de finition et de polissage. Contrôler l'occlusion et les mouvements fonctionnels, et adapter si nécessaire. Polir les limites marginales de la restauration à l'aide de polissoirs (**OptraPol**) ou de disques.

#### 8 Application de fluor sur les dents



Appliquer une fine couche de **Fluor Protector** à l'aide d'une Vivabrush ou d'une brosse, et répartir de manière régulière. Sécher le vernis à l'air.