

Used Products

임플란트 - 지르코늄 옥사이드로 제작된 어버트먼트 - 브릿지 - 옥사이드 세라믹 - 유지력이 있는 어버트먼트 형태 - 구치 - Vivaglass CEM

☐ **VivaglassCEM PL**

국내에서 유효하지 않습니다



☐ **OptraStick**

는 쉽고, 효과적이고, 편안하게 치료부위 확장을 가능하게 하는 보조기구입니다



☐ **Telio CS Inlay**

Temporary light-curing filling material for deep inlay preparations with parallel walls and sealing of implant screw access holes



☐ **OptraGate**

이 기구는 입술과 볼을 완전히 견인해 상대적인 격리를 보장합니다.



☐ **Ivoclean**

The universal cleaning paste Ivoclean effectively cleans the bonding surfaces of prosthetic restorations after intraoral try-in



☐ **OptraPol**

OptraPol 은 모든 대중적인 복합레진 수복물들을 단 한 단계로 마무리하고 연마하는데 매우 적합합니다



☐ **Cervitec Plus**

The protective varnish containing chlorhexidine and thymol protects exposed root surfaces and controls bacteria



흐름도 Vivaglass CEM

임플란트 - 지르코늄 옥사이드로 제작된 어버트먼트 - 브릿지 - 옥사이드 세라믹 - 유지력이 있는 어버트먼트 형태 - 구치 - Vivaglass CEM

1 술 전 상황



어버트먼트가 준비된 위치에 나사로 고정됩니다.

2 수복물이 시적됩니다




영구수복물이 시적됩니다. 이 단계에서, 웨이드, 적합 정확도 그리고 수복물의 교합이 확인됩니다.

3 스crew 접근 홀이 세척되고 봉쇄됩니다.



Detergere a fondo il canale filettato dell'abutment con spray d'acqua e asciugare con soffio d'aria privo di acqua e di olio. Successivamente sigillare il canale filettato dell'abutment con cotone, o batuffolino di spugna assorbente e **Telio CS Inlay**. Per le successive fasi del trattamento è necessario garantire un completo isolamento del campo operatorio, p.e. con **OptraGate**. E' previsto l'uso opzionale di un filo di retrazione.

4 수복물이 전처리됩니다

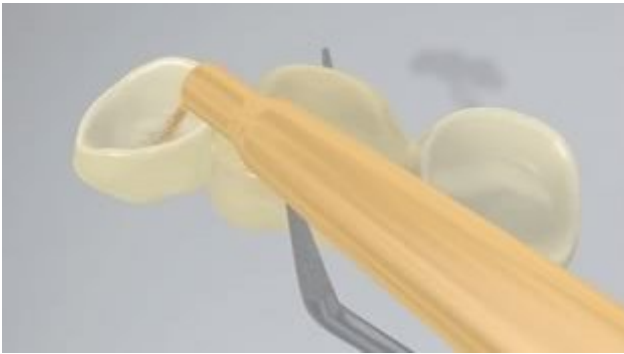

수복물의 내면이 샌드블라스트됩니다 (예. **IPS e.max ZirCAD**, 1 bar, Al_2O_3 100 μm 또는 수복재료 제조사에 의해 지시된 내용에 따라).

5 Vivaglass CEM이 혼합되고 적용됩니다



Vivaglass CEM 파우더와 리퀴드가 1:1 비율로 혼합됩니다. Bridge의 시멘테이션을 위해, 관련된 지대치의 수에 따라 재료의 양이 증가됩니다.



루팅 재료가 스페츨라 또는 브러시를 사용해 수복물에 적용됩니다.

6 수복물이 장착되고 과잉 시멘트가 제거됩니다



수복물이 장착되고 가볍고 지속적인 압력을 사용해 제 위치에 유지됩니다.



시멘트가 완전히 경화되면, 과잉이 예를 들어 임플란트 스케일러를 사용해 제거됩니다. 경화시간은 4-6분입니다.

7 완성된 수복물이 마무리됩니다



인접 부위가 마무리 기구와 연마 기구를 사용해 조정됩니다. 교합과 기능적 움직임이 확인되고 필요할 경우 조정됩니다. 수복물 마진은 연마기구 (**OptraPol**) 또는 디스크를 사용해 연마됩니다.

8 치료 후 관리



얇은 층의 **Cervitec Plus** (국내에서 유효하지 않습니다) 가 Vivadent 어플리케이터나 브러시를 사용해 필요한 곳에 적용됩니다. 바니시는 자체적으로 또는 에어를 적용해 정착합니다.